

Ilustración 1

Introducción

El manual de usuario contiene información sobre como se ajusta Meyland Discover, como se mantiene, precauciones de seguridad y datos técnicos.

Meyland Discover está destinado a servir como ayuda de gateo para niños pequeños y sólo es adecuado para uso en interiores.

En la ilustración 1 se indican las diferentes partes del gateador.

Preparación para el uso

Meyland Discover se suministra completamente montado y, por lo tanto, simplemente debe ajustarse para adaptarse al niño antes del uso.

Ajustes

La altura de la eslinga se ajusta en cada lado con los soportes de resorte colocados en los puntales. Se recomienda fijar siempre la altura por igual en cada lado. La altura se ajusta con el muelle lateral y ajustando la abrazadera a la altura deseada. (ver ilustración 2)

Meyland Discover no tiene frenos. Las cuatro ruedas son suaves y giratorias para dar al niño tanta libertad de movimiento como sea posible.

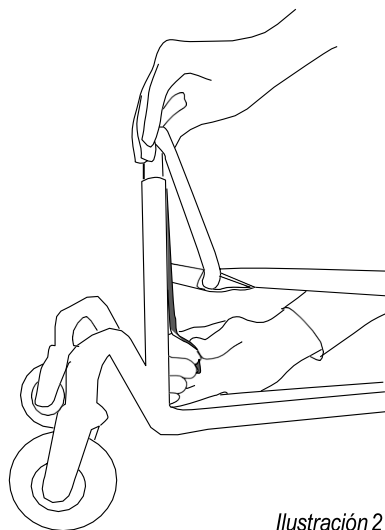


Ilustración 2

Precauciones de seguridad

Advertencia:

Meyland Discover nunca debe utilizarse sin la presencia de un adulto y nunca en lugares donde exista el riesgo de que el niño pueda caerse. (escaleras o similares).

Advertencia:

Meyland Discover nunca debe utilizarse para estar sentado o de pie, ya que fácilmente puede desestabilizar al niño.

Limitaciones de uso:

El peso máximo admisible es de usuarios de hasta 25 kg.

Meyland Discover sólo debe ser utilizado en planos horizontales y superficies estables

Mantenimiento

Todas las partes de Meyland Discover se pueden limpiar con agua caliente y jabón.

Debe comprobarse periódicamente que los pernos, tornillos y tuercas estén apretados, en caso necesario, volver a apretarlos.

Datos técnicos

Datos técnicos	Talla 1	Talla 2
Anchura total	52 cm	52 cm
Profundidad total	31 cm	31 cm
Anchura eslinga	28 cm	28 cm
Profundidad eslinga	18 cm	24 cm
Altura de la eslinga	10 - 21 cm	10 - 21 cm
Peso	4 kg	4 kg
Carga máxima	25 kg	25 kg

El chasis está hecho de tubos de acero recubiertos de polvo y la eslinga está hecha de imitación de cuero.



Manual de usuario **meylandDiscover**
Talla 1 y talla 2

meyland-smith a/s

Industrivej 27 DK-9830 Taars

Tel: +45 98 96 19 85 Fax: +45 98 9d 19 8d
www.meyland-smith.dk info@meyland-smith.dk

meyland-smith
mobility and more