

V-Drive



ELECTROS EXPRESS

El sistema de asistencia eléctrica para silla manual V-Drive simplifica sus movimientos en las sillas manuales y libera al asistente de la silla de cualquier esfuerzo.

Funciona en pequeños escalones, inclinaciones, imperfecciones en el terreno o para simplemente pasar un día fuera de casa.

El mando es muy simple de usar y asegura un óptima calidad y confort para el día a día en la combinación de su silla manual y el V-Drive.

Ofrecemos dos versiones del V-Drive, la primera estándar, para usuarios de menos de 135 kg. y una versión XXL para usuarios de hasta 200kg. Ambas versiones incorporan de serie la opción de conducción en doble sentido (anterior y posterior).

El V-Drive es muy simple de instalar y podrá poner el mando tanto a la izquierda como a la derecha de la silla. Podrá desmontar el V-drive muy fácilmente para plegar la silla; desconecte el pack de baterías, el sistema de conducción y estará listo para plegar la silla.



Ancho de asiento (talla)

39-53
50-60 XXL



Km/h

6 km/h



Pendiente máxima

8°



Baterías

2 x 12V 12 Ah



Potencia

150 W
200 W



Autonomía

15 km
10 km



Peso máx. usuario

135kg
200 kg



Peso

11,8 kg +
8,2 kg (baterías)

Desviaciones en tamaño y peso (1,5 cm y 1,5 kg)

V-drive

Confort

El sistema de asistencia eléctrica **V-Drive** amplía el margen de movilidad de su silla de ruedas manual.

Ayuda al acompañante a empujar la silla de ruedas. Para superar pendientes o sencillamente para dar un paseo al aire libre... dos situaciones perfectas para utilizar el dispositivo de impulso auxiliar V-Drive.

Con el intuitivo control del V-Drive podrá usar su silla de ruedas a diario con total comodidad.

Ofrecemos dos versiones del dispositivo de impulso auxiliar V-Drive:

Versión estándar (carga máx. hasta 135 kg, incl. silla de ruedas)


Versión con mayor capacidad de carga H.D. (carga máx. hasta 200 kg, incl. silla de ruedas)



Montaje



La unidad de mando se puede fijar a la izquierda o a la derecha del respaldo, sin necesidad de utilizar herramientas. Para transporte (p. ej. en un coche) el V-Drive se puede separar sin esfuerzo de la silla de ruedas. Retire el paquete de batería independiente, quite la unidad propulsora de la silla de ruedas, y listo. Si no desea utilizar el V-Drive, puede levantar del suelo la unidad propulsora y colgarla de una de las empuñaduras: así podrá volver a manejar manualmente la silla de ruedas.

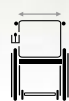

Modelo							(sin batería)	
Estándar	39-48	6 km/h	8°	15 km	2 x 12 V 12 Ah	150 W	11,8	135
H.D.	50-60	6 km/h	8°	15 km	2 x 12 V 12 Ah	200 W	8,2	200

Las medidas, pesos y ángulos (1,5 cm, 1,5 kg, 1,5°) pueden diferir.

