



**the ROHO group**  
shape fitting technology®



REHAGIRONA

**EL ORIGINAL  
NO ACEPTE COPIAS**



## QUADTRO SELECT® PERFIL BAJO

El cojín QUADTRO SELECT PERFIL BAJO con sus celdas de 5 cm de altura está indicado para usuarios con posturas simétricas o levemente asimétricas que requieren un apoyo postural moderado y que tienen un riesgo de moderado a bajo de sufrir daño en la piel.


Incorpora la válvula memorizadora de posición ISOFLO™



## QUADTRO SELECT® PERFIL ALTO

El cojín QUADTRO SELECT PERFIL ALTO gracias a sus celdas de 10 cm, es el más efectivo en aquellos usuarios con posturas asimétricas que requieren un posicionamiento progresivo y que necesitan un elevado nivel de protección de la piel.

Incorpora la válvula memorizadora de posición ISOFLO™

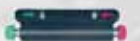

## CONTOUR SELECT®

El cojín Contour Select proporciona la protección de la piel de un producto The ROHO Group, con el posicionamiento y la estabilidad necesarias para aumentar la función del usuario. El diseño anatómico estabiliza posteriormente la pelvis y centra al cliente confortablemente en el medio del cojín.

Incorpora la válvula memorizadora de posición ISOFLO™



## LOW PROFILE® PERFIL BAJO

El cojín ROHO PERFIL BAJO está formado por celdas con aire intercomunicadas que maximizan la estabilidad del paciente a la vez que le protegen del riesgo potencial de sufrir daños en los tejidos. Ligero y transportable, este cojín es ideal para usuarios activos.



## HIGH PROFILE® PERFIL ALTO

El cojín ROHO PERFIL ALTO, está formado por celdas con aire intercomunicadas que proporcionan un entorno ajustable, de baja deformación, que contraresta los efectos de la presión y favorece la curación de las úlceras por su efecto. Apropiado para clientes con alto riesgo de sufrir una úlcera por presión.



## ENHANCER®

El cojín ENHANCER utiliza el posicionamiento "aire en su sitio" ("AIR IN PLACE") en un sistema con 2 canales de diseño único para un correcto centrado y alineación de pelvis y fémures, estabilidad lateral y protección de los tejidos.





# VÁLVULA ISOFLO™



La revolucionaria Unidad Memory Control (válvula) ISOFLO ofrece la capacidad de adaptar a medida la forma del cojín mientras el usuario está sentado, permitiendo en todo momento un ajuste personalizado, fácil y rápido para maximizar su función. El control asociado a colores facilita visualmente la operación. Los cojines SELECT ofrecen versatilidad con sus cuatro cuadrantes controlados por la Unidad Memory Control ISOFLO.



Con la válvula abierta, el aire circula por todo el cojín ajustando la posición del paciente en función de su prominencia ósea más baja y sus necesidades específicas de asiento.



Con la válvula cerrada, la Unidad Memory Control ISOFLO bloquea el cojín en la posición de asiento requerida, impidiendo que el aire se desplace de un cuadrante a otro.

DISTRIBUIDOR OFICIAL

 **rehagirona**

**Rehagirona s.l.**  
Trens Petits 1  
Pol. Ind. Mas Xirgu.  
17005 Girona

T+34 902 48 72 72  
F+34 972 40 50 54  
rehagirona@rehagirona.com  
www.rehagirona.com