


Triciclo Rifton

FLEXIBILIDAD Y ADAPTABILIDAD

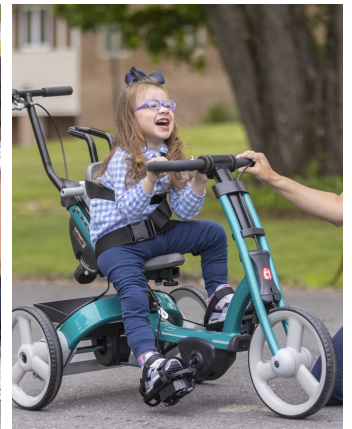

¡Muy accesible y funcional! Así es el triciclo Rifton, una **óptima solución para la movilidad, disponible en 3 tallas** (pequeña, mediana y grande).

PRINCIPALES BENEFICIOS DEL TRICICLO RIFTON

Gracias a este triciclo terapéutico **se consigue mejorar la fuerza en las piernas, el equilibrio y la resistencia**, entre otros aspectos físicos. Además de los beneficios físicos, conducir un triciclo **ayuda a la socialización y al desarrollo de las capacidades funcionales y musculoesqueléticas**. Gracias su uso se consigue más resistencia, aumento de la capacidad respiratoria y mejora de las extremidades inferiores en general.

Su diseño sin obstáculos favorece una **fácil entrada y salida**. Además, el **ajuste es sin herramientas** y algunos accesorios, tales como el sistema de apoyo del tronco o la barra de dirección delantera o trasera, hacen posible **personalizar el triciclo para satisfacer la necesidad de cada niño**.

Algunas características destacadas son:

- La altura del asiento se ajusta en un riel de baja fricción, incluso cuando está en uso.
- Los pedales se ajustan hacia adelante y hacia atrás en el pedal manivela para posicionar los pies del usuario de manera óptima.
- Resistencia de pedal variable para ayudar a los usuarios a moderar su velocidad.
- Las sandalias se pueden quitar para utilizar los pedales estándares de bicicleta.
- Correa de transmisión de fibra de carbono duradera y libre de mantenimiento.
- Se desmonta fácilmente para el transporte.

EL TRICICLO RIFTON AYUDA A MEJORAR LA MOVILIDAD

Permite trabajar la **coordinación motora** y la **disociación de los movimientos de los miembros inferiores, cubriendo las necesidades de la mayoría de los usuarios**. Proporciona momentos de ocio e integración, así como máxima facilidad de ajuste.

Caract. y Espec.

- Disponible en 3 tallas: pequeña, mediana y grande
- Resistencia de pedal variable: el freno ajustable puede proporcionar arrastre o bloquear las ruedas para una transferencia segura
- Coloque el ángulo del respaldo verticalmente o con una inclinación de 7,5º o 15º
- La correa de transmisión de fibra de carbono no se oxida ni se estira, y dura al menos cinco veces más que una cadena de bicicleta
- La profundidad del asiento se ajusta fácilmente con una perilla debajo
- El usuario puede sentirse más independiente cuando un cuidador le ayuda desde atrás con la barra de dirección trasera
- Los soportes laterales de tronco y el manillar son abatibles para facilitar las transferencias
- El asiento se desliza hacia arriba y hacia abajo sobre un riel de baja fricción
- La barra de guía delantera fomenta la interacción cara a cara
- El triciclo Rifton ofrece distintos niveles de configuración, según las necesidades del usuario
- ¡Una gran manera de hacer ejercicio!
- Para facilitar el transporte retira las ruedas traseras y la parte delantera, y baja el respaldo

Medidas

MEDIDAS USUARIO

Medidas en cm y peso en kg.

	TALLA PEQUEÑA	TALLA MEDIANA	TALLA GRANDE
Longitud interior de la pierna	30-55	48-70	63-97

Dimensión del usuario clave: longitud interior de la pierna

La pierna extendida debe alcanzar cómodamente desde el asiento hasta el pedal cuando tanto los pies como el torso están atados en su lugar.

Importante: el peso del usuario no debe exceder la carga máxima de trabajo. Los triciclos Rifton no están destinados a clientes con reflejos fuertes o equilibrio del tronco y control de la cabeza poco desarrollados.

MEDIDAS TRICICLO

Medidas en cm y peso en Kg.

	TALLA PEQUEÑA	TALLA MEDIANA	TALLA GRANDE
Ancho promedio	67	70	80
Longitud total	112	135	165
Altura total (en la posición más baja con las ruedas/parte delantera desmontada para el transporte)	54	54	76
Longitud total sin asa trasera (ruedas y parte delantera quitadas)	91	104	124
Longitud total con asa trasera (sin ruedas ni parte delantera)	122	130	152
Diámetro de la rueda	12"	15"	18"
Centro del asiento a pedal extendido	38-51	48-71	64-91
Asiento hasta la parte superior del soporte del maletero (altura máx.)	51	61	61
Relación de transmisión	1:1	1:1	1:1
Peso	22	25	29

Rango de ajuste de los laterales	Soporte tronco pequeño: 15 - 30	Soporte tronco pequeño: 15 - 30 Soporte tronco grande: 24 - 39	Soporte tronco grande: 24 - 39
Carga máxima	57	113	140

Modelos y tallas

- SC3201100 Triciclo Rifton - Talla pequeña
- SC3202100 Triciclo Rifton - Talla mediana
- SC3203100 Triciclo Rifton - Talla grande

Colores



Rosa



Rojo



Azul



Verde azulado



Blanco



Negro



Lima

Accesorios



Funda para exterior triciclo Rifton



Cesta delantera triciclo Rifton



Kit de elevación de pedales triciclo Rifton



Soporte estacionario triciclo Rifton



Barra para soporte de dispositivos electrónicos triciclo Rifton



Arnés pélvico triciclo Rifton



Abductor triciclo Rifton



Barra de guía delantera triciclo Rifton



Anclajes de mano triciclo Rifton



Barras de empuje o dirección triciclo Rifton



Soportes laterales de tronco triciclo Rifton



Reposacabezas triciclo Rifton