



Bipedestadores

# **Bantam** COMBINA POSICIÓN SUPINA, SEDESTACIÓN Y BIPEDESTACIÓN





















Bantam de EasyStand es el único bipedestador que combina la posición de sentado a bipedestación y en posición supina. Comenzar desde una posición de sedestación es una transición más natural a bipedestar; sin embargo, para algunos niños los traslados a la posición supina son más manejables. Bantam permite pasar de decúbito supino a posición de sedestación y de bipedestación, así como pararse en cualquier punto intermedio.

Al alternar posiciones, **el usuario puede tolerar estar de pie bipedestando durante más tiempo**. Además, como es más seguro y fácil para un cuidador trasladar y poner de pie a un niño, el niño bipedestará con más frecuencia, **lo que aumentará su bienestar**. El bipedestador Bantam se adapta a niños desde atención temprana hasta la escuela primaria.

Está disponible en 3 tallas, y el más grande, **Bantam M**, combina características de **Bantam** y **Evolv** para hacerlo **más apropiado para el niño más grande y participativo**. A medida que el niño crece, las transferencias se vuelven más difíciles y, como resultado, el cumplimiento de un programa permanente a menudo se ve afectado.

### Caract. y Espec.

- Bipedestador adaptable a múltiples posiciones
- Ajuste personalizado para una mejor posición
- Muchas opciones de posicionamiento / sedestación
- Pude utilizarse como la silla de alimentación
- Rango de movimiento gradual con flexión de cadera y rodilla
- Soporte completo en cualquier posición
- Inclusión en la escuela y el hogar
- Amplio rango de crecimiento

#### **Medidas**

Medidas en cm y peso en kg.

	TALLA XS	TALLA S	TALLA M
Rango de altura aproximado	71-102	91-137	122-168
Límite de peso	23 kg	45	91
Rango de profundidad del asiento (desde el pivote del asiento hasta la superficie del respaldo)	18-31	28-41	_
Rango de profundidad del asiento, plano (desde el pivote del asiento hasta la superficie plana del respaldo)	_	_	38-51


Rango de profundidad			
del asiento, contorno (desde el pivote del asiento hasta la superficie plana del respaldo)	_	_	38-51
Altura del asiento desde el suelo (altura de transferencia)	48	48	
Altura del asiento (plano) desde el suelo (altura de transferencia)	_	_	56
Altura del asiento (contorno) desde el suelo (altura de transferencia)	_		64
Rango del asiento al reposapiés (desde el frente del asiento)	25-42	25-42	(plano) 25-47
Rango de asiento a reposapiés: soportes invertidos	11-28	11-28	(plano) 18-32
Rango de profundidad de la rodillera (desde el frente del asiento)	6-22	6-22	8-20
Ancho de la rodillera	14	14	20
Dimensiones de la rodillera	_	_	23×18
Altura del respaldo desde el asiento, contorno y plano	28-33	_	_
Altura del respaldo desde el asiento, contorno	32-37		_
Altura del respaldo desde el asiento, plano	_	36-41	_
Altura del respaldo desde el asiento plano hasta la parte superior del respaldo, corto			38
Altura del respaldo desde el asiento plano hasta la parte superior del respaldo, alto	_	_	48
Altura del respaldo desde el asiento Contour hasta la parte superior del respaldo, corto	_	_	42
Altura del respaldo desde el asiento Contour hasta la parte superior del respaldo, alto			52

Peso de la unidad básica	24,5	24,5	49
Tamaño del chasis: estándar	62×93	62×93	62×113
iliviecanismo de elevacion i	Elevación por resorte de gas	Elevación por resorte de gas	Elevador hidráulico manual
Rodillera (acceso interior a la almohadilla)	6×13	9X13	_
Tamaño del reposapiés	20×8	25×10	_
Tamaño del asiento plano	24×24	33×34	_
Tamaño de la almohadilla trasera plana	24×17	20-31×25	_
Tamaño de la almohadilla del asiento plano (ancho)	_	_	38

# Modelos y tallas

EA-PT50001-1 Bantam - Talla XS
EA-PT50002-1 Bantam - Talla S
EA-PY5690 Bantam - Talla M

## **Colores**

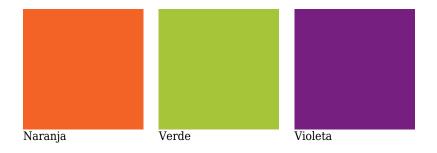

## Accesorios

Blanco





laterales Bantam



Funda higiénica para soportes Funda higiénica para respaldo Bantam



Identificador de ángulo EasyStand



Asas de empuje EasyStand



Funda higiénica para soportes de cadera Bantam



Bantam



Funda higiénica para asiento Ajuste fácil de profundidad de asiento Easy Stand



Cinchas de seguridad para soporte de pies Bantam



Cinchas para soporte de pies Bantam



Apoyo de pantorilla Bantam



Funda higiénica acolchada para bandeja Bantam y Evolv



Apoyo de antebrazo para bandeja Bantam



Empuñaduras Bantam y Evolv



Almohadillado para codo Bantam