




Blake
Medical Distribution

Cojines Geo-Matrix™

Cojín Hybrid Deep Low Profile Geo-Matrix™

ENVOLVIMIENTO Y ESTABILIDAD

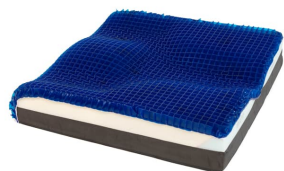

El cojín antiescaras **Hybrid Deep Low Profile Geo-Matrix™** ofrece las mismas ventajas que el **Hybrid Deep Geo-Matrix™**, pero con una reducción de altura de 2,5 cm. Está indicado para la prevención y el tratamiento de lesiones por presión para personas con alto riesgo de desarrollarlas y/o para usuarios con **riesgo moderado de lesiones cutáneas**.

Este cojín de prevención de escaras se utiliza a menudo para **brindar comodidad a usuarios que requieren una posición y un contorno óptimos**, con una excelente distribución de la presión y un control moderado de la vibración.

El cojín **Hybrid Deep Low Profile Geo-Matrix™** tiene una **altura de 6,5 cm** y **está formado por una placa de gel** que aumenta la comodidad y reduce la presión detrás de las rodillas, un **núcleo doble de espuma de alta densidad** con una plataforma isquiática y sacra firme y una **base de espuma de celda cerrada**.

Soporta una carga máxima de 125 kg. Está **protegido por una funda exterior suave al tacto**, a prueba de incontinencia, y una **funda interior lavable**, a prueba de humedad.

Caract. y Espec.

- Cojín antiescaras para prevención y tratamiento de úlceras por presión para personas con alto riesgo de desarrollarlas
- Buena alternativa al cojín Geo-Matrix™ Hybrid Deep si se requiere una menor altura del asiento al suelo
- Ideal para usuarios que no necesitan tanta sumersión
- Diseñado para usuarios con riesgo moderado de lesiones cutáneas
- Ofrece soporte postural robusto
- Ideal para personas con rotación pélvica posterior y/o con tendencia a escurrirse
- Reducción de cizallamiento
- Control moderado de la vibración
- Indicado para tuberosidades isquiáticas prominentes
- Soporta una carga máxima de 113 kg

Medidas

Medidas en cm.

Carga máxima: 113 kg.

Código del cojín: BK-GHDLP**XXXX** (**código de anchura y profundidad, que aparece en el recuadro**)

| Profundidad | Anchura | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 |
| 35 | 3535 | 3835 | 4035 | 4335 | 4535 | 4835 | 5035 | 5335 | 5535 | | |
| 38 | 3538 | 3838 | 4038 | 4338 | 4538 | 4838 | 5038 | 5338 | 5538 | | |
| 40 | 3540 | 3840 | 4040 | 4340 | 4540 | 4840 | 5040 | 5340 | 5540 | 5840 | 6040 |
| 43 | 3543 | 3843 | 4043 | 4343 | 4543 | 4843 | 5043 | 5343 | 5543 | 5843 | 6043 |
| 45 | 3545 | 3845 | 4045 | 4345 | 4545 | 4845 | 5045 | 5345 | 5545 | 5845 | 6045 |
| 48 | 3548 | 3848 | 4048 | 4348 | 4548 | 4848 | 5048 | 5348 | 5548 | 5848 | 6048 |
| 50 | 3550 | 3850 | 4050 | 4350 | 4550 | 4850 | 5050 | 5350 | 5550 | 5850 | 6050 |
| 53 | | | 4053 | 4353 | 4553 | 4853 | 5053 | 5353 | 5553 | 5853 | 6053 |
| 55 | | | 4055 | 4355 | 4555 | 4855 | 5055 | 5355 | 5555 | 5855 | 6055 |

Accesorios



Funda exterior extra cojín Geo-
Matrix™ Funda interior extra cojín Geo-
Matrix™

Gel Geo-Matrix™

Limpieza