




Blake
Medical Distribution

Cojines Geo-Matrix™

Cojín Split Geo-Matrix™

ADAPTABILIDAD Y VERSATILIDAD

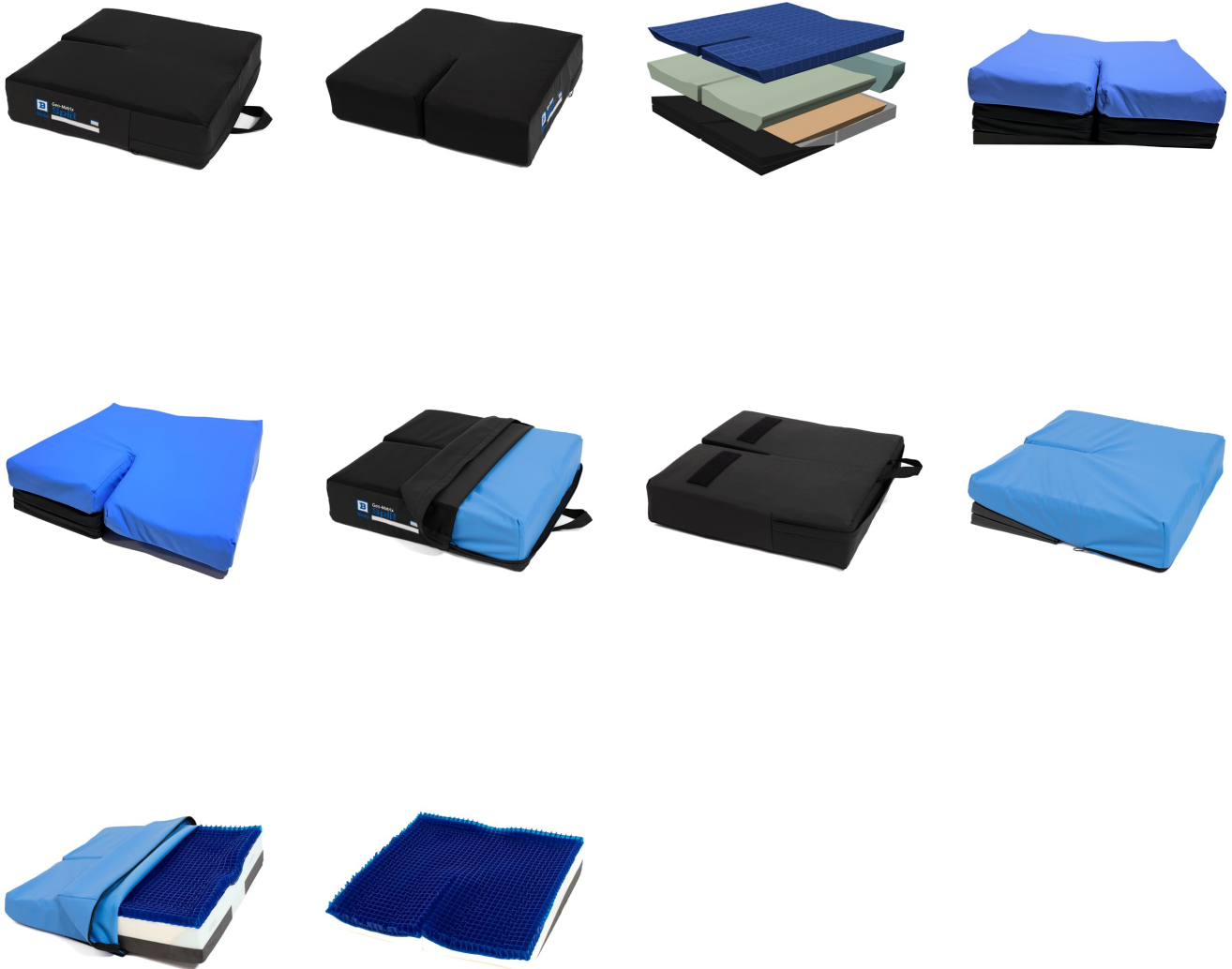

El **cojín de posicionamiento Split Geo-Matrix™** brinda comodidad a los usuarios que requieren un posicionamiento y contorno suaves con una excelente redistribución de la presión y control de la vibración. También está **indicado para la prevención de úlceras por presión para personas con muy alto riesgo de desarrollarlas.**

El cojín Split presenta una **división de 20 cm** directamente en el centro de la parte delantera, **permitiendo insertar cuñas debajo de uno o ambos lados de la zona de las piernas** para un mayor posicionamiento y funcionalidad del cojín.

Puedes ajustar el tipo de soporte o inmersión deseada sustituyendo el inserto de debajo de la zona del cóccix. El inserto estándar es ideal para la estabilidad y la movilidad en la silla de ruedas, y las 2 opciones que se ofrecen como accesorio son:

- **Inserto de espuma:** si el usuario tiene bajo peso y necesita una mayor inmersión o una protección suave y cómoda.

- **Inserto de gel Geo-Matrix™:** si el usuario necesita mayor hundimiento y menor fuerza de cizallamiento, proporcionando protección adicional para las protuberancias óseas.

Para complementar este cojín, **se puede adquirir un kit de ajuste con varias cuñas**, como accesorio, **fijándolas a la base del cojín mediante velcros.** Para una personalización inmediata, estas cuñas se pueden poner o quitar según sea necesario, permitiendo realizar modificaciones fácilmente en función de las necesidades del usuario.

El cojín **Split Geo-Matrix™** tiene una **altura de 9 cm** y **está formado por una placa de gel** que aumenta la comodidad y reduce la presión detrás de las rodillas, un **núcleo doble de espuma de alta densidad** con una plataforma sacra firme y una **base de espuma de celda cerrada.**

Soporta una carga máxima de 91 kg. Está **protegido por una funda exterior suave al tacto**, a prueba de incontinencia, y una **funda interior lavable**, a prueba de humedad.

Caract. y Espec.

- Tiene una división de 20 cm directamente en el centro de la parte delantera
- La placa superior de gel Geo-Matrix™ aumenta la comodidad, reduce la presión, previene la fricción y el cizallamiento, y gestiona el microclima
- Cojín antiescaras para prevención de úlceras por presión para personas con alto riesgo de desarrollarlas
- Para una mayor personalización, puede substituir el inserto de debajo la sección del coxis (dos opciones extras disponibles como accesorios)
- Se puede adquirir cuñas extraíbles que se pueden insertar debajo de uno o ambos lados de la zona de las piernas del cojín para adaptarse al ángulo de cadera deseado por cada usuario
- Cada cuña está hecha de una resistente espuma de celda cerrada y se fija a la funda interior del cojín

Medidas


Medidas en cm.

Carga máxima: 125 kg.

Código del cojín: BK-GSPXXXX (código de anchura y profundidad, que aparece en el recuadro)

Profundidad	Anchura										
	35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60
35	3535	3835	4035	4335	4535	4835	5035	5335	5535		
38	3538	3838	4038	4338	4538	4838	5038	5338	5538		
40	3540	3840	4040	4340	4540	4840	5040	5340	5540	5840	6040
43	3543	3843	4043	4343	4543	4843	5043	5343	5543	5843	6043
45	3545	3845	4045	4345	4545	4845	5045	5345	5545	5845	6045
48	3548	3848	4048	4348	4548	4848	5048	5348	5548	5848	6048
50	3550	3850	4050	4350	4550	4850	5050	5350	5550	5850	6050
53			4053	4353	4553	4853	5053	5353	5553	5853	6053
55			4055	4355	4555	4855	5055	5355	5555	5855	6055

Accesorios

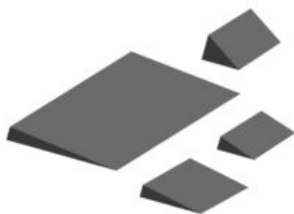

Kit de cuñas para cojín Geo-Matrix™ Split



Inserto de espuma Geo-Matrix™



Inserto de gel Geo-Matrix™



Funda exterior extra cojín Geo-Matrix™



Funda interior extra cojín Geo-Matrix™

Gel Geo-Matrix™

Limpieza