




Blake
Medical Distribution

Coixins Geo-Matrix™

Coixí Split Geo-Matrix™

ADAPTABILITAT I VERSATILITAT

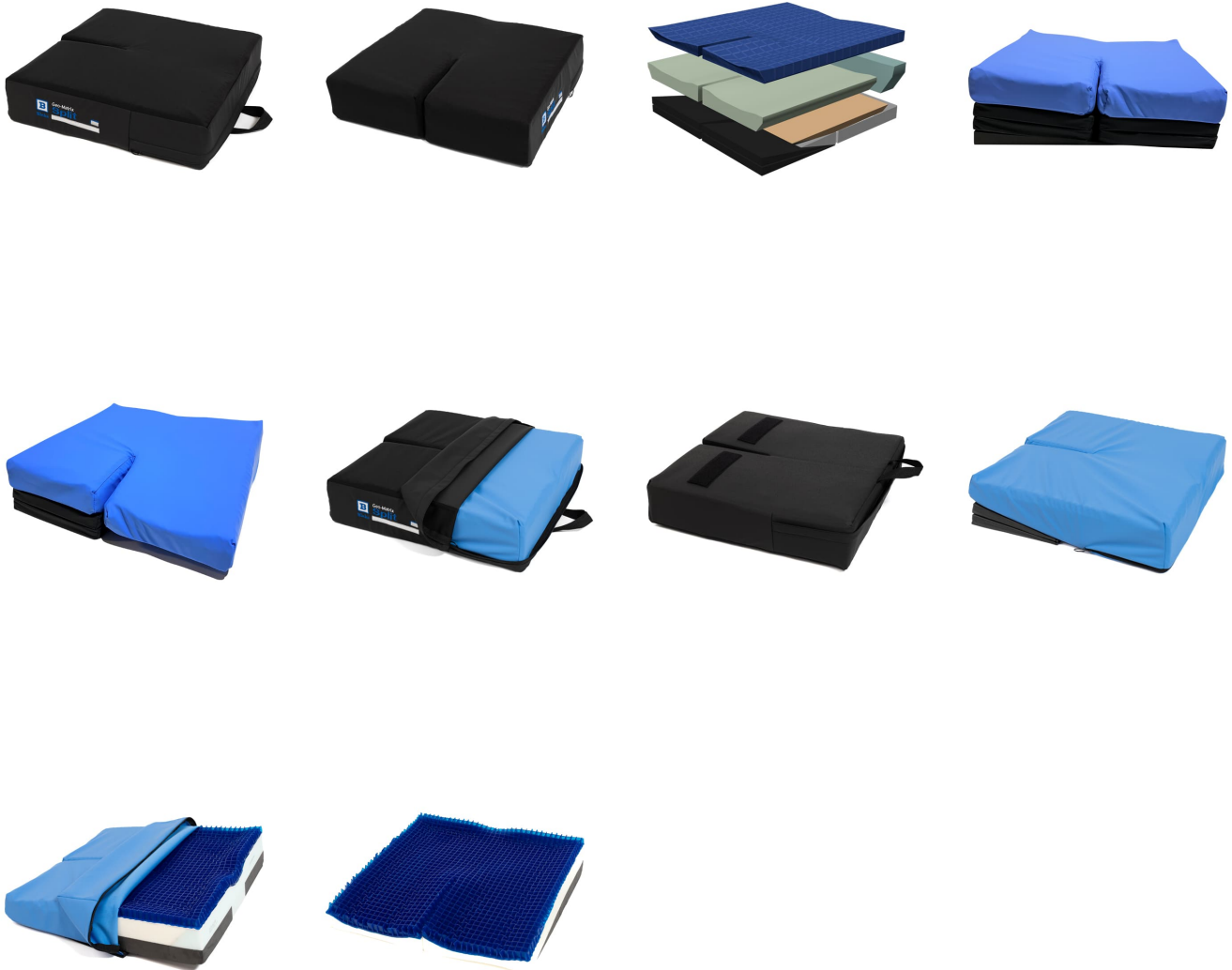

El coixí de posicionament **Split Geo-Matrix™** ofereix comoditat als usuaris que requereixen un posicionament i contorn suaus amb una excel·lent redistribució de la pressió i control de la vibració. També està **indicat per a la prevenció d'úlceres per pressió per a persones amb molt alt risc de desenvolupar-les.**

El coixí Split presenta una **divisió de 20 cm** directament al centre de la part davantera, **permetent inserir falques sota un o ambdós costats de la zona de les cames** per a un major posicionament i funcionalitat del coixí.

Pots ajustar el tipus de suport o immersió desitjada substituint l'inserit de sota la zona del còccix. L'inserit estàndard és ideal per a l'estabilitat i la mobilitat a la cadira de rodes, i les 2 opcions que s'ofereixen com a accessori són:

• **Inserit d'escuma:** si l'usuari té baix pes i necessita una immersió més gran o una protecció suau i còmoda.

• **Inserit de gel Geo-Matrix™:** si l'usuari necessita més enfonsament i menys força de cisallament, proporcionant protecció addicional per a les protuberàncies òssies.

Per complementar aquest coixí, **es pot adquirir un kit d'ajust amb diverses falques**, com a accessori, **fixant-les a la base del coixí mitjançant velcros.** Per a una personalització immediata, aquestes falques es poden posar o treure segons calgui, permetent fer modificacions fàcilment en funció de les necessitats de l'usuari.

El coixí **Split Geo-Matrix™** té una **alçada de 9 cm** i està format per una **placa de gel** que augmenta la comoditat i redueix la pressió darrere dels genolls, un **nucli doble d'escuma d'alta densitat** amb una plataforma sacra ferma i una **base d'escuma de cel·la tancada.**

Suporta una càrrega màxima de 91 kg. Està **protegit per una funda exterior suau al tacte**, a prova d'incontinència, i una **funda interior rentable**, a prova d'humitat.

Caract. i Especi.

- Té una divisió de 20 cm directament al centre de la part davantera
- La placa superior de gel Geo-Matrix™ augmenta la comoditat, redueix la pressió, prevé la fricció i el cisallament, i gestiona el microclima
- Coixí antiescares per a prevenció d'úlceres per pressió per a persones amb alt risc de desenvolupar-les
- Per a més personalització, podeu substituir l'inserit de sota la secció del còccix (dues opcions extres disponibles com a accessoris)
- Es poden adquirir falques extraïbles que es poden inserir sota un o ambdós costats de la zona de les cames del coixí per adaptar-se a l'angle de maluc desitjat per cada usuari
- Cada falca està feta d'una escuma resistent de cel·la tancada i es fixa a la funda interior del coixí

Mesures


Mides en cm.

Càrrega màxima: 125 kg.

Codi del coixí: BK-GSPXXXX (codi d'amplada i profunditat, que apareix al requadre)

Profundidad	Anchura										
	35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60
35	3535	3835	4035	4335	4535	4835	5035	5335	5535		
38	3538	3838	4038	4338	4538	4838	5038	5338	5538		
40	3540	3840	4040	4340	4540	4840	5040	5340	5540	5840	6040
43	3543	3843	4043	4343	4543	4843	5043	5343	5543	5843	6043
45	3545	3845	4045	4345	4545	4845	5045	5345	5545	5845	6045
48	3548	3848	4048	4348	4548	4848	5048	5348	5548	5848	6048
50	3550	3850	4050	4350	4550	4850	5050	5350	5550	5850	6050
53			4053	4353	4553	4853	5053	5353	5553	5853	6053
55			4055	4355	4555	4855	5055	5355	5555	5855	6055

Accessoris

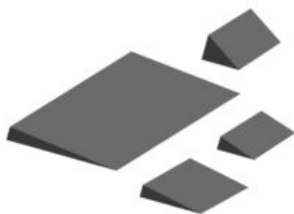

Kit de falques per a coixí Geo-Matrix™ Split



Insert d'escuma Geo-Matrix™



Insert de gel Geo-Matrix™



Funda exterior extra coixí Geo-Matrix™



Funda interior extra coixí Geo-Matrix™

Gel Geo-Matrix™

Neteja